



∴ **Серия HEINE GAMMA®**


Ударопрочные и безлатексные сфигмоманометры  
и стетоскопы



## Лучшие в своем классе

Те, кто предпочитает высочайшую точность диагностики, выбирает высокое качество


- Ударопрочный
- Корпус с двойными стенками
- Три варианта крепления манометра
- Превосходит все соответствующие стандарты

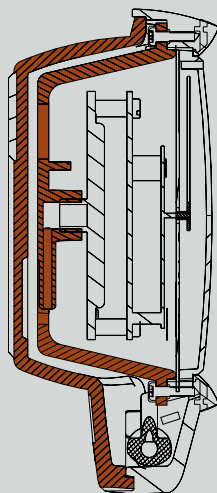

### Корпус с двойными стенками и три варианта крепления манометра


Серия приборов GAMMA G имеет ударопрочную систему, которая защищает манометр и обеспечивает приборы непревзойденной прочностью. Серия приборов GAMMA G тестирована значительно больше европейского (EN1060) и американского (SP9) стандартов.

Тест на прочность. Высота в см.

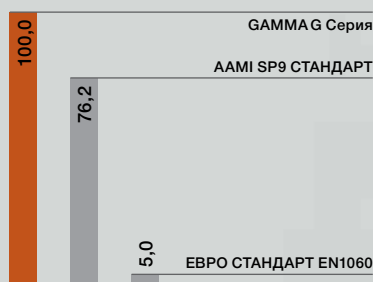

### Дизайн «с одной трубкой» и эксклюзивной системой нагнетания воздуха

Эксклюзивная система нагнетания воздуха контролирует воздушный поток на манометр во время нагнетания, обеспечивая ровность и точность увеличения давления и долгий срок службы прибора. У серии GAMMA G сейчас те же характеристики, которые были доступны до этого только сфигмоманометрам «с двумя трубками».

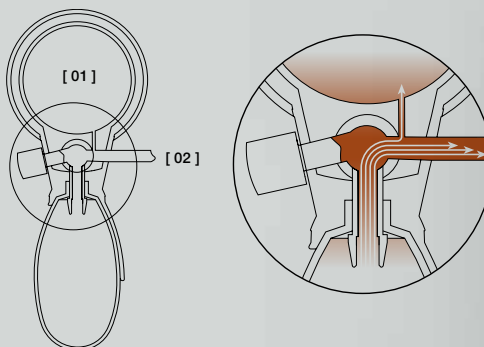

[ 01 ] МАНОМЕТР  
[ 02 ] ТРУБКА ДО МАНЖЕТЫ

Новая серия инновационных, ударопрочных и безлатексных сфигмоманометров GAMMA G — это новый стандарт в исполнении, качестве и цене. Функциональный и модный дизайн в комбинации с высококачественным точным манометром и надежной конструкцией гарантирует надежную работу в течение многих лет в любых клинических условиях.

Серия GAMMA G/Подтверждение клинического одобрения:

Серия GAMMA G теперь клинически одобрена Европейским Союзом по гипертензии. Протокол аттестации для GAMMA G подтверждает долговременную точность измерения систолического и диастолического давления крови.



## [ HEINE GAMMA® G5 ]

GAMMA G5

Код для заказа:

Со взрослой манжетой	<b>M-000.09.230</b>
С детской манжетой	<b>M-000.09.231</b>
С детской, взрослой и большой манжетами	<b>M-000.09.555</b>
Со взрослой манжетой, без чехла, упаковка 10 шт	<b>M-000.09.561</b>

**Стандартный сфигмоманометр HEINE**

GAMMA G5 сочетает дизайн и качественные характеристики. Корпус спрессован из двух компонентов термопластика (Polyamide/TP Elastomer), поглощает удары и имеет противоскользящее покрытие.

Большую инфуляционную грушу легко держать в руках, что позволяет быстро нагнетать воздух в манжету.

- ⋮ **Без латекса**
- ⋮ **Ударопрочный**
- ⋮ **Эксклюзивная система нагнетания воздуха**
- ⋮ **Манометр, защищенный от избытка давления:**  
Гарантия надежности и достоверности.
- ⋮ **Микрофильтр:** Защищает клапан и манометр.
- ⋮ **Шкала большого диаметра:**  
(56 мм) удобна для просмотра.

- ⋮ **Большая инфуляционная груша:** Объем груши больше на 50 % для быстрого нагнетения воздуха в манжету.
- ⋮ **Эксклюзивный воздуховыпускающий клапан:** Обеспечивает точную регулировку выпускаемого воздуха, быстрый выпуск и долговечность. Резиновый стопор предотвращает блокировку клапана.
- ⋮ **Нижняя часть корпуса спрессована из двух компонентов термопластика (Polyamide/TP-Elastomer).** Поглощающая удары, с противоскользящим покрытием.
- ⋮ **Регулируемый упор (Polyamide/TP-Elastomer):** Для праворуких и леворуких.
- ⋮ **Качественная манжета с одной трубкой и застежкой «липучка».** Возможна стирка.
- ⋮ **5 лет гарантии\*.**

\*GAMMA G5 гарантирует отсутствие производственных дефектов.



## [ HEINE GAMMA® G7 ]

GAMMA G7

Код для заказа:

Со взрослой манжетой	<b>M-000.09.232</b>
С детской манжетой	<b>M-000.09.233</b>
С детской, взрослой и большой манжетами	<b>M-000.09.554</b>
Со взрослой манжетой, без чехла, упаковка 10 шт.	<b>M-000.09.560</b>

**Корпус из алюминиевого сплава, высокоточный клапан**

Сфигмоманометр GAMMA G7 уникален в своей конструкции. Корпус изготовлен из алюминиевого сплава и двух компонентов термопластика (Polyamide/TP-Elastomer), что производит ударопрочный и современный дизайн.

Сочетает в себе особенности дизайна и качества GAMMA G5, за исключением следующих моментов:

- ⋮ **Верх корпуса** сделан из алюминиевого сплава. Современный термопластик (Polyamide/TP-Elastomer) с поглощающим удары кольцом защищает индикатор и стекло.
- ⋮ **Нижняя часть корпуса** спрессована из двух компонентов термопластика (Polyamide/TP-Elastomer). Поглощает удары, с противоскользящим покрытием.
- ⋮ **Легкий сплав, регулируемый упор:**  
Для праворуких и леворуких.
- ⋮ **10 лет гарантии\*.**

\*GAMMA G7 гарантирует отсутствие производственных дефектов.



## [ HEINE GAMMA® GP ]

GAMMA GP | Код для заказа:

Со взрослой манжетой	M-000.09.242
С детской манжетой	M-000.09.243
С детской, взрослой и большой манжетами	M-000.09.556
Со взрослой манжетой, без чехла, упаковка 10 шт.	M-000.09.562

**Стандартный сфигмоманометр со спусковой кнопкой**

Сочетает дизайн и качественные характеристики сфигмоманометра GAMMA G5, но с воздухопускающим клапаном, выполненным в виде спусковой кнопки.

- ⋮ **Иновационный воздухопускающий клапан — спусковая кнопка.**  
Обеспечивает точную регулировку выпускаемого воздуха, быстрое выкачивание и крайне высокую долговечность. Простота в обращении. Подходит для праворуких и леворуких.

- ⋮ **5 лет гарантии\*.**

\*GAMMA GP гарантирует отсутствие производственных дефектов.



## [ HEINE GAMMA® XXL LF ]

GAMMA XXL LF | Код для заказа:

GAMMA XXL LF-W, НАСТЕННЫЙ ВАРИАНТ	M-000.09.323
GAMMA XXL LF-S, МОБИЛЬНЫЙ ВАРИАНТ	M-000.09.326
GAMMA XXL LF-R, ВАРИАНТ КРЕПЛЕНИЯ НА РЕЛЬС	M-000.09.325
GAMMA XXL LF-T, НАСТОЛЬНЫЙ ВАРИАНТ (ПРЯМАЯ ИНСУФЛЯЦИОННАЯ ТРУБКА)	M-000.09.322

**Универсальная профессиональная модель**

Классическая модель HEINE GAMMA XXL LF теперь без латекса и имеет различные опции крепления, что делает сфигмоманометр идеальным инструментом в любых клинических условиях.

Регулируемая черно-белая шкала большого размера удобна для чтения даже на расстоянии.

Безртутный сфигмоманометр GAMMA XXL LF безопасен для людей и окружающей среды.

- ⋮ **Без латекса**
- ⋮ **Прочная поликарбоневая конструкция** обеспечивает бесперебойную работу даже при большой нагрузке в крупных госпиталях.
- ⋮ **Черно-белая шкала большого диаметра 130 мм** удобна для чтения с любого угла.
- ⋮ **Длинная спиральная инсуфляционная трубка (3 мм)** увеличивает рабочую дистанцию.
- ⋮ **Высококачественный индикатор** точно откалиброван и надежен.
- ⋮ **Воздуховыпускающий клапан** обеспечивает точную регулировку выпускаемого воздуха.
- ⋮ **Манометр, защищенный от избытка давления:** Гарантия надежности и достоверности.
- ⋮ **Различные варианты крепления: настенный, мобильный (регулировка высоты), на рельс и на стол.**
- ⋮ **Безртутный**
- ⋮ **10 лет гарантии\*.**

\*GAMMA XXL LF гарантирует отсутствие производственных дефектов.

[ XXL LF-S ]



[ XXL LF-T ]



[ XXL LF-R ]



[ XXL LF-W ]

## [ МАНЖЕТЫ/АКСЕССУАРЫ ]

<b>Манжеты с одной трубкой для GAMMA G7/G5/GP</b>	Детский (малый)	6x28	M-000.09.700
	Детский	10x34	M-000.09.702
	Взрослый (малый)	14x53	M-000.09.704
	Взрослый	14x58	M-000.09.619
	Для бедра	20x86	M-000.09.615
<b>Манжеты для GAMMA XXL LF</b>	Детский (малый)	6x28	M-000.09.701
	Детский	10x34	M-000.09.703
	Взрослый (малый)	14x53	M-000.09.705
	Взрослый	14x58	M-000.09.629
	Для бедра	20x86	M-000.09.625
<b>Аксессуары для крепления и детали для GAMMA XXL LF</b>	Дежатель манжеты	Для настольного крепления GAMMA XXL LF-T	M-000.09.141
	Настольный стенд	Для настольного крепления GAMMA XXL LF-T	M-000.09.142
	Универсальная установочная пластина	Для настенного, мобильного крепления и на рельс GAMMA XXL LF-R/LF-W/LF-S	M-000.09.306
	Рельсовый зажим	GAMMA XXL LF-R	M-000.09.307
	Регулируемый стенд на колесах	GAMMA XXL LF-S	M-000.09.145



## СТЕТОСКОПЫ HEINE GAMMA®

- ⋮ Стетоскопы HEINE серии GAMMA с **цельной головкой** и идеальным весом исключают побочные шумы вследствие манипуляций и обеспечивают отличную передачу звука. Гигиеническое покрытие стетоскопов матовое хромированное.
- ⋮ **Ободок не вызывает ощущения холода** для комфорта пациента.
- ⋮ Бинауральные хромированные металлические трубки имеют возможность индивидуальной настройки.
- ⋮ **Длина U-образной трубки** стетоскопов 56 см. Трубка обеспечивает идеальную акустику и воспроизведение звука.
- ⋮ Стетоскопы серии GAMMA **не содержат латекса**.

## [ HEINE GAMMA® 3.1 Пульсовый стетоскоп ]

GAMMA 3.1 | Код для заказа:

M-000.09.941

## Превосходная акустика

- ⋮ **Стетоскоп с цельной плоской головкой.** Головку легко можно разместить под манжетой сфигмоманометра.

- ⋮ **Высококачественная мембрана,** 44 мм в диаметре.

- ⋮ **Система с одной трубкой** обладает отличной передачей звука.

- ⋮ **Включает ушные оливы** (большие/мягкие) для звукоизоляции.

- ⋮ **Опция:** ушные оливы (маленькие/ жесткие) (M-000.09.946).



## [ HEINE GAMMA® 3.2 Акустический стетоскоп ]

GAMMA 3.2 | Код для заказа:

M-000.09.942

## Превосходная акустика

Технические характеристики, как у GAMMA 3.1, но с двойной головкой.

- ⋮ **Комбинированная двойная головка** с двумя различными диапазонами частот: высококачественная мембрана с одной стороны и коническая акустическая — с другой.

- ⋮ **Высококачественная мембрана,** диаметр 44 мм обеспечивает отличные акустические характеристики и звукопередачу.

- ⋮ **Диаметр конуса 30 мм.**



## [ HEINE GAMMA® 3.3 Акустический стетоскоп ]

GAMMA 3.3 | Код для заказа:

M-000.09.943

## Для обследования детей

Технические характеристики как у GAMMA 3.2.

- ⋮ Благодаря **меньшей контактной площади** (31 мм) GAMMA 3.3 идеально подходит для обследования детей.



## [ HEINE GAMMA® C3 Кардиологический стетоскоп ]

GAMMA C3 | Код для заказа:

M-000.09.944

## Разработан специально для кардиологии

- ⋮ **Исключительные акустические характеристики,** идеально передают звуки низкой частоты в кардиологии.

- ⋮ **Комбинированная двойная головка** с двумя различными диапазонами частот: высококачественная мембрана с одной стороны и коническая акустическая — с другой.

- ⋮ Идеальная звукопередача и превосходный контакт с кожей **высококачественной двойной мембраны** диаметром 45 мм обеспечивает исключительное качество звука.

- ⋮ **Система «две трубки в одной».** Конструкция с толстой внешней трубкой для исключения внешних шумов и улучшения звуковой передачи.

- ⋮ **Включает ушные оливы** (большие/мягкие) и одну сменную пару (маленькие/жесткие) для звукоизоляции.



Имя HEINE характеризует продукцию высочайшего качества!

**HEINE** QUALITY  
MADE IN GERMANY

" - "

<http://heine-med.ru/>  
[info@heine-med.ru](mailto:info@heine-med.ru)

127 238, . , Дмитровское ш. 85  
: (495) 902-59-26 ., , (495) 518-55-99

HEINE,

HEINE ( ) -

!

