

Сфигмоманометры и стетоскопы

УДАРОПРОЧНЫЕ БЕЗЛАТЕКСНЫЕ СФИГМОМАНОМЕТРЫ

Новая серия инновационных ударопрочных безлатексных сфигмоманометров GAMMA G — это новый стандарт в исполнении, качестве и цене. Функциональный и модный дизайн в комбинации с высококачественным точным манометром и надежной конструкцией гарантирует надежную работу в течение многих лет в любых клинических условиях.

Клинически одобрены.



Серия GAMMA G теперь клинически одобрена Европейским союзом по гипертензии. Протокол аттестации для GAMMA G подтверждает долговременную точность измерения систолического и диастолического давления крови.


Стетоскопы для точной аускультации

Стетоскопы HEINE GAMMA третьей серии идеальны для повседневного использования. Значительное улучшение акустических характеристик повышает точность прослушивания сердечных, легочных и васкулярных шумов.





УДАРОПРОЧНОСТЬ

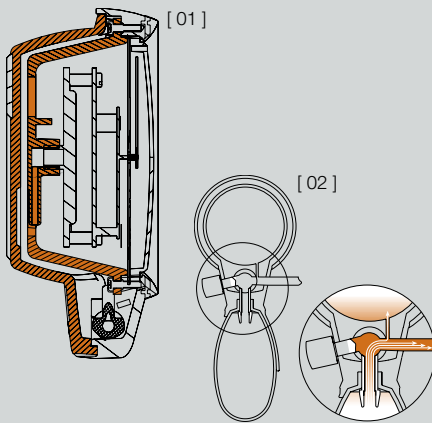

УДАРОПРОЧНОСТЬ

[01] Сфигмоманометры HEINE представляют собой конструкцию с ударопрочными двойными стенками и уникальной защитой манометра. Данные характеристики позволяют противостоять ударам, что подтверждено европейскими (EN1060) и американскими (SP9) исследованиями.

СИСТЕМА НАГНЕТАНИЯ ВОЗДУХА

[02] Дизайн «с одной трубкой» с эксклюзивной системой нагнетания воздуха контролирует воздушный поток на манометр во время нагнетания, обеспечивает ровность и точность увеличения давления и долгий срок службы прибора. У серии тонометров GAMMA G те же характеристики, которые до недавнего времени были доступны только сфигмоманометрам «с двумя трубками».

HEINE GAMMA G7®

Лучший в серии с конструкцией из алюминиевого сплава



∴ Ударопрочный

∴ Без латекса

∴ Алюминиевый верхний корпус

∴ 10 лет гарантии

- ∴ Ударопрочный.
- ∴ Без латекса.
- ∴ Эксклюзивная система нагнетания воздуха (патент оформляется в Германии).
- ∴ Манометр защищен от избытка давления, что гарантирует достоверность показаний.
- ∴ Микрофильтр защищает клапан и манометр.
- ∴ Черно-белая шкала большого диаметра (56 мм) удобна для просмотра.
- ∴ Высококачественный индикатор, точно калиброванный, надежный и устойчивый к ударам.
- ∴ Большая инсuffляционная груша. Объем груши увеличен на 50 % для быстрого нагнетания воздуха в манжету.
- ∴ Эксклюзивный воздуховыпускающий клапан обеспечивает точную регулировку выпускаемого воздуха, быстрый выпуск и долговечность манометра. Резиновый стопор предотвращает блокировку клапана.
- ∴ Верх корпуса сделан из алюминиевого сплава. Современный термопластик (Polyamide/TP Elastomer) с поглощающим удары кольцом защищает индикатор и стекло.
- ∴ Нижняя часть корпуса спрессована из двух компонентов термопластика (Polyamide/TP Elastomer). Поглощает удары, с противоскользящим покрытием.
- ∴ Легкий сплав, регулируемый упор — для праворуких и леворуких.
- ∴ Качественная манжета с одной трубкой и застежкой «липучка». Возможна стирка.
- ∴ Эргономичный дизайн. Отличный баланс комфорта и простоты использования.
- ∴ 10 лет гарантии*.

* Касается производственных дефектов в течение 10 лет с даты покупки.

GAMMA G7	
Со взрослой манжетой	M-000.09.232
С детской манжетой	M-000.09.233
С детской, взрослой и большой манжетами	M-000.09.554
Со взрослой манжетой без чехла, упаковка 10 шт.	M-000.09.560

HEINE GAMMA G5®

Стандартный сфигмоманометр HEINE



Сочетает дизайн и качественные характеристики сфигмоманометра GAMMA G7, но имеет ряд отличий:

- ∴ Корпус спрессован из двух компонентов термопластика (Polyamide/TP Elastomer). Поглощает удары, с противоскользящим покрытием.
- ∴ Регулируемый упор (Polyamide/Thermo Plastic) — для праворуких и леворуких.
- ∴ 5 лет гарантии*.

* Касается производственных дефектов в течение 5 лет с даты покупки.

GAMMA G5	
Со взрослой манжетой	M-000.09.230
С детской манжетой	M-000.09.231
С детской, взрослой и большой манжетами	M-000.09.555
Со взрослой манжетой без чехла, упаковка 10 шт.	M-000.09.561

∴ Ударопрочный

∴ Без латекса

∴ Термопластиковый корпус

HEINE GAMMA GP®

Стандартный сфигмоманометр HEINE со спусковой кнопкой



Сочетает дизайн и качественные характеристики сфигмоманометра GAMMA G5, но с воздухопускающим клапаном, выполненным в виде спусковой кнопки.

- ∴ Инновационный воздухопускающий клапан — спусковая кнопка. Обеспечивает точную регулировку выпускаемого воздуха, быстрое выкачивание и крайне высокую долговечность манометра. Прост в обращении, подходит для праворуких и леворуких.
- ∴ 5 лет гарантии*.

* Касается производственных дефектов в течение 5 лет с даты покупки.

GAMMA GP	
Со взрослой манжетой	M-000.09.242
С детской манжетой	M-000.09.243
С детской, взрослой и большой манжетами	M-000.09.556
Со взрослой манжетой без чехла, упаковка 10 шт.	M-000.09.562

∴ Ударопрочный

∴ Без латекса

∴ Термопластиковый корпус



HEINE GAMMA XXL LF®

Универсальный профессиональный сфигмоманометр



[01]

- ⌘ Большая шкала
- ⌘ Без латекса
- ⌘ 10 лет гарантии

Безртутные сфигмоманометры GAMMA XXL LF безопасны для людей и окружающей среды.

- ⌘ **Без латекса.**
- ⌘ **Прочная поликарбонровая конструкция** обеспечивает бесперебойную работу даже при большой нагрузке в крупных госпиталях.
- ⌘ **Черно-белая шкала большого диаметра (130 мм)** удобна для чтения.
- ⌘ **Длинная спиральная инсuffляционная трубка (3 м)** увеличивает рабочую дистанцию.
- ⌘ **Высококачественный индикатор** точно откалиброван и надежен.
- ⌘ **Воздуховыпускающий клапан** обеспечивает точную регулировку выпускаемого воздуха.
- ⌘ **Манометр защищен от избытка давления**, что гарантирует достоверность показаний.

Различные варианты крепления: настенный, мобильный (регулировка высоты), на рельс и на стол.

- ⌘ **10 лет гарантии***.

* Касается производственных дефектов в течение 10 лет с даты покупки.

GAMMA XXL LF	
GAMMA XXL LF-W, настенный вариант [01]	M-000.09.323
GAMMA XXL LF-S, мобильный вариант [02]	M-000.09.326
GAMMA XXL LF-R, вариант крепления на рельс [03]	M-000.09.325
GAMMA XXL LF-T, настольный вариант (прямая инсuffляционная трубка) [04]	M-000.09.322



[03]



[02]



[04]

Принадлежности	
Держатель манжеты для GAMMA XXL LF-T	M-000.09.141
Настольный стенд для GAMMA XXL LF-T	M-000.09.142
Мобильный стенд для GAMMA XXL LF-S	M-000.09.145
Универсальный держатель для GAMMA XXL LF-W, -S, -R	M-000.09.306
Крепление на рельс для GAMMA XXL LF-R	M-000.09.307

Манжеты для сфигмоманометров

Безлатексные манжеты для измерения давления

Предназначены для сфигмоманометров GAMMA G7/G5/GP/GST/GAMMA XXL LF.



- ∴ Без латекса.
- ∴ Совместимы с наиболее широко используемыми сфигмоманометрами.
- ∴ Высококачественные, с застежкой «липучка», выполнены из износостойкого материала.
- ∴ Двойная прошивка.
- ∴ Допускают стирку и не линяют.
- ∴ Имеют указатели для правильного соединения.
- ∴ Указан размер, позволяющий контролировать радиус окружности руки.
- ∴ Очень плотные и гибкие соединительные трубки для продолжительной службы.
- ∴ Надежность, доказанная испытаниями. Абсолютно герметичная система.

 GAMMA G7/G5/GP	Манжета с 1 трубкой			Внутренняя часть		Внешняя часть	
	Размер	Окружность, см		Размер		Размер	
Детский (малый)	6x28	8–13	M-000.09.700	5x15	M-000.09.661	6x28	M-000.09.059
Детский	10x34	13–20	M-000.09.702	8x20	M-000.09.663	10x34	M-000.09.060
Взрослый (малый)	14x53	20–29	M-000.09.704	11x23	M-000.09.664	14x53	M-000.09.061
Взрослый	14x58	29–41	M-000.09.619	12x28	M-000.09.665	14x58	M-000.09.055
Для бедра	20x86	>41	M-000.09.615	18x52	M-000.09.667	20x86	M-000.09.057

 GAMMA XXL LF	Манжета с 2 трубками			Внутренняя часть		Внешняя часть	
	Размер	Окружность, см		Размер		Размер	
Детский (малый)	6x28	8–13	M-000.09.701	5x15	M-000.09.671	6x28	M-000.09.059
Детский	10x34	13–20	M-000.09.703	8x20	M-000.09.673	10x34	M-000.09.060
Взрослый (малый)	14x53	20–29	M-000.09.705	11x23	M-000.09.674	14x53	M-000.09.061
Взрослый	14x58	29–41	M-000.09.629	12x28	M-000.09.675	14x58	M-000.09.055
Для бедра	20x86	>41	M-000.09.625	18x52	M-000.09.677	20x86	M-000.09.057

GAMMA GST	Манжета с 1 трубкой со стетоскопом			Внутренняя часть		Внешняя часть	
	Размер	Окружность, см		Размер		Размер	
Взрослый	14x53	22–32	M-000.09.621	11x23	M-000.09.669	14x53	M-000.09.079



НОВИНКА!

СТЕТОСКОПЫ HEINE GAMMA®

- **Цельная головка** и идеальный вес стетоскопа исключают побочные шумы вследствие манипуляций и обеспечивают отличный резонанс. Гигиеническое матовое хромированное покрытие.
- **Бинауральные хромированные металлические трубки.** Индивидуальная настройка.
- **Высококачественная У-образная трубка** обеспечивает идеальную акустику и воспроизведение звука. Длина 56см.
- **Без латекса.**
- **5-летняя гарантия** на материалы и качество изготовления.

Стетоскоп HEINE GAMMA 3.1®

Превосходная акустика



- **Стетоскоп с цельной плоской головкой.** Головку легко можно разместить под манжетой сфигмоманометра.
- **Высококачественная мембрана, 44 мм.**
- **Система с одной трубкой** обладает отличной передачей звука.
- **Включает ушные оливки** (маленькие/жесткие) для звукоизоляции.
- **Опция:** ушные оливки большие/мягкие (M-000.09.945).

Стетоскоп GAMMA 3.1

M-000.09.941

Акустический стетоскоп HEINE GAMMA 3.2®

Превосходная акустика



Технические характеристики, как у GAMMA 3.1, но с двойной головкой.

- **Комбинированная двойная головка** с двумя различными диапазонами частот: высококачественная мембрана с одной стороны и коническая акустическая — с другой.
- **Высококачественная мембрана, диаметр 44 мм** обеспечивает отличные акустические характеристики и звукопередачу.
- **Диаметр конуса 30 мм.**

Стетоскоп GAMMA 3.2

M-000.09.942

Акустический стетоскоп HEINE GAMMA 3.3®

Для обследования детей



Технические характеристики, как у GAMMA 3.2.

- **Благодаря меньшей контактной площади** (31 мм) GAMMA 3.3 идеально подходит для обследования детей.

Стетоскоп GAMMA 3.3

M-000.09.943

Кардиологический стетоскоп HEINE GAMMA C3®

Идеально в кардиологии



- **Исключительные акустические характеристики.** Идеально передают звуки низкой частоты в кардиологии.
- **Комбинированная двойная головка** с двумя различными диапазонами частот: высококачественная мембрана с одной стороны и коническая акустическая — с другой.
- **Идеальная звукопередача и и превосходный контакт** с кожей высококачественной двойной мембраны диаметром 45 мм обеспечивает исключительное качество звука.
- **Система «две трубки в одной» без латекса.** Конструкция с толстой внешней трубкой для исключения внешних шумов и улучшения звуковой передачи.
- **Включает ушные оливки** (большие/мягкие) и одну сменную пару (маленькие/жесткие) для звукоизоляции.

Стетоскоп GAMMA C3

M-000.09.944

Имя HEINE характеризует продукцию высочайшего качества!

HEINE QUALITY
MADE IN GERMANY

"

-

"

<http://heine-med.ru/>
info@heine-med.ru

127 238, . , Дмитровское ш. 85
: (495) 902-59-26 ., , (495) 518-55-99

HEINE,

HEINE () -

!

