
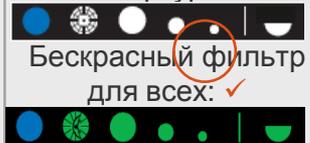
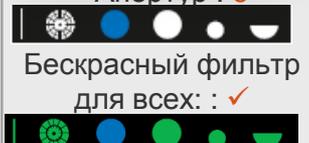
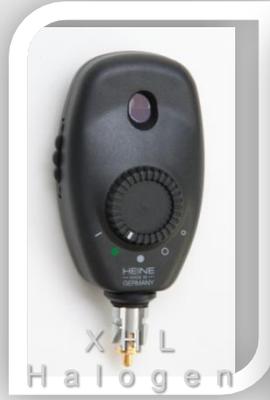
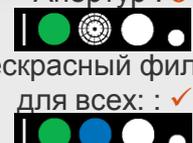
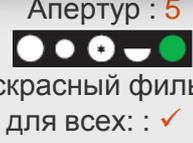


HEINE ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ ОФТАЛЬМОСКОПЫ ПРЯМЫЕ

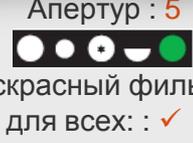

Обзор прямых офтальмоскопов и основные отличия

HEINE BETA 200S	HEINE BETA 200	HEINE K180	HEINE MINI 3000	HEINE MINI 3000LED
<p>Шаг в 1 диоптрию!</p>  <p>X H L Halogen</p> <p>Апертур: 7</p>  <p>Бескрасный фильтр для всех: ✓</p> <p>Ряд линз: -36+38 Кол-во линз: 74</p>	 <p>X H L Halogen</p> <p>Апертур : 6</p>  <p>Бескрасный фильтр для всех: : ✓</p> <p>Ряд линз: -35+40 Кол-во линз: 27</p>	 <p>X H L Halogen</p> <p>Апертур : 5</p>  <p>Бескрасный фильтр для всех: : ✓</p> <p>Ряд линз: -35+40 Кол-во линз: 27</p>	 <p>mini 3000 HEINE GERMANY</p> <p>X H L Halogen</p> <p>Апертур : 5</p>  <p>Бескрасный фильтр для всех: : ✓</p> <p>Ряд линз -20+20 Кол-во линз: 18</p>	 <p>mini 3000 LED HEINE GERMANY</p> <p>X H L LED NOW IN HEINE QUALITY.</p> <p>NEW</p> <p>Апертур : 5</p>  <p>Бескрасный фильтр для всех: : ✓</p> <p>Ряд линз -20+20 Кол-во линз: 18</p>
<p>Пыленепроницаемый</p> <p>Асферическая оптическая система (АОС)</p> <p>Металлический корпус</p> <p>Ксенон-галогеновое освещение</p> <p>Дорогой-полноразмерные</p>	<p>Пылезащитный корпус</p> <p>Стандартная</p> <p>Не металлический корпус</p> <p>Светодиодное освещение</p> <p>Экономный-компактный</p>	<p>Средняя цена</p>	<p>Экономный-компактный</p>	<p>HEINE QUALITY MADE IN GERMANY</p>

HEINE ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ ОФТАЛЬМОСКОПЫ ПРЯМЫЕ ВЕТА 200S; ВЕТА 200; К 180

Офтальмоскопы для профессиональных осмотров.
Общие характеристики



ИНТУИТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОДНОЙ РУКОЙ

Удобное исследование
Обеспечивает Гибкую диагностику и
универсальность применения.

ПЛАВНАЯ РЕГУЛИРОВКА ЯРКОСТИ

С дополнительным индикатором
уровня мощности

ЭРГОНОМИЧНАЯ ФОРМА ИНСТРУМЕНТА

Подходит для работы в любом
положении пациента

ДЛЯ ШИРОКОГО И УЗКОГО ЗРАЧКА

2 (ВЕТА 200) / 3 (ВЕТА 200S)
размера апертур освещает
необходимую площадь дна глаза,
для картинки в фокусе



РАЗЛИЧНЫЕ ВИДЫ РУКОЯТОК И МЕТОДЫ ЗАРЯДКИ

Способ крепления головки
инструмента к рукоятке – байонет.
Питание от рукоятки ВЕТА
(металлический хромированный
корпус с регулировкой яркости)
батареечной 2,5 В или
перезаряжаемой 3,5 В.

ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ФУНКЦИЯ «ГОТОВ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ»

В комбинации с рукояткой ВЕТА NT
прибор автоматически
выключается при помещении в
зарядное устройство NT300
и возвращается к заданной
интенсивности света каждый раз
при вынимании.



HEINE ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ ОФТАЛЬМОСКОПЫ ПРЯМЫЕ BETA 200S

Офтальмоскопы для профессиональных осмотров.



Бескрасный фильтр
для всех: ✓

Апертур: 7



Ряд линз: -36+38

Кол-во линз: 74

ЗОЛОТОЙ СТАНДАРТ
КАЧЕСТВА ПРЯМОГО
ОФТАЛЬМОСКОПА.

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

ДИАПАЗОН РЕФРАКЦИИ КОРРЕКТИРУЕТСЯ 28 ЛИНЗАМИ
С 74 ШАГАМИ В ОДНУ ДИОПТРИЮ.

+ шаг в 1 диоптрию

1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23/24/25/26/27/28/29/30/31/32/33/34/35/36/37/38D (зеленый)

- шаг в 1 диоптрию

1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23/24/25/26/27/28/29/30/31/32/33/34/35/36D (красный)

СЕМЬ АПЕРТУР С «БЕСКРАСНЫМ» ФИЛЬТРОМ, ДЛЯ
ШИРОКОГО И УЗКОГО ЗРАЧКОВ

Щель, полусфера, маленький зрачок, большой зрачок, точечная апертура, фиксационная звездочка со шкалой, голубой кобальтовый фильтр



HEINE ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ ОФТАЛЬМОСКОПЫ ПРЯМЫЕ BETA 200S

Варианты для покупки



Используется только с рукоятками BETA

ОФТАЛЬМОСКОП BETA 200S

Офтальмоскоп BETA 200S	2,5 В	3,5 В
Без рукоятки	C-001.30.120	C-002.30.120
XHL Ксенон-галогеновая лампа	X-001.88.069	X-002.88.070

Набор включает:

офтальмоскоп BETA 200S, запасную лампу, твердый кейс.



Наборы офтальмоскопа BETA 200S	2,5 В	3,5 В (NiMH)	3,5 В Li ION
Батарейная рукоятка BETA	C-261.10.118		
Перезаряжаемая рукоятка BETA R		C-261.20.376	C-261.27.376
Перезаряжаемая рукоятка BETA TR с трансформатором		C-261.20.384	C-261.27.384
Перезаряжаемая рукоятка BETA NT с зарядным блоком NT 300		C-261.20.420	
 Перезаряжаемая рукоятка BETA L с зарядным блоком NT 300			C-261.29.420

 Перезаряжаемая рукоятка с индикатором заряда на нижнем модуле.



HEINE ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ ОФТАЛЬМОСКОПЫ ПРЯМЫЕ BETA 200S, ретиноскоп BETA 200 Streak (полоса)

Варианты для покупки.



Набор включает:

офтальмоскоп BETA 200S, ретиноскоп BETA 200 Streak (полоса),
запасную лампу для каждого инструмента, твердый кейс.

Диагностические наборы BETA200S	2,5 В	3,5 В (NIMH)	3,5 В LI ION
Батарейная рукоятка BETA	C-262.10.118		
Перезаряжаемая рукоятка BETA R		C-262.20.376	C-262.27.376
Перезаряжаемая рукоятка BETA TR с трансформатором		C-262.20.384	C-262.27.384
Перезаряжаемая рукоятка BETA NT с зарядным блоком NT 300		C-262.20.420	
 Перезаряжаемая рукоятка BETA L с зарядным блоком NT 300			C-262.29.420

 Перезаряжаемая рукоятка с индикатором заряда на нижнем модуле.



HEINE Офтальмология

BETA 200 / 200S Офтальмоскопы



ПОШАГОВЫЙ КОНТРОЛЬ ЯРКОСТИ

С дополнительным
индикатором уровня
заряда



АСФЕРИЧЕСКАЯ ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА (АОС)

Устраняет рефлекс
роговицы
Обеспечивает большое и
безбликовое изображение
глазного дна



СМОТРОВОЕ ОКНО

Многослойное с
мультипокрытием

РАВНОМЕРНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Отличная передача цвета
Оптика высокого качества
Точный диагноз

HEINE ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ ОФТАЛЬМОСКОПЫ ПРЯМЫЕ ВЕТА ВЕТА 200

Офтальмоскопы для профессиональных осмотров.



ЛУЧШИЙ ОФТАЛЬМОСКОП
ПРЕВОСХОДНОГО
КАЧЕСТВА

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

ОФТАЛЬМОСКОП С УНИКАЛЬНОЙ АСФЕРИЧЕСКОЙ ОПТИКОЙ И ПОЛНЫМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ ВЕТА 200S, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ АПЕРТУРЫ «ТОЧКА» И СЛЕДУЮЩЕГО РЯДА ДИОПТРИЧЕСКИХ ЛИНЗ:

+ шаг в 1 диоптрию /1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/15/20/40D (зеленый)

- шаг в 1 диоптрию /2/3/4/5/6/7/8/9/10/15/20/25/35D (красный)

ШЕСТЬ АПЕРТУР С «БЕСКРАСНЫМ» ФИЛЬТРОМ, ДЛЯ ШИРОКОГО И УЗКОГО ЗРАЧКОВ

Щель, полусфера, маленький зрачок, большой зрачок, фиксирующая звездочка, голубой кобальтовый фильтр



Бескрасный фильтр
для всех: ✓

Апертур : 6



Кол-во линз: 27

Ряд линз: -35+40

HEINE ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ ОФТАЛЬМОСКОПЫ ПРЯМЫЕ BETA 200

Варианты для покупки



Используется только с рукоятками BETA

ОФТАЛЬМОСКОП BETA 200



Офтальмоскоп BETA 200	2,5 В	3,5 В
Без рукоятки	C-001.30.100	C-002.30.100
Офтальмоскоп BETA 200 M2, без рукоятки. Аналогичен BETA 200, апертура с фиксационной звездой без линейки и точкой вместо малого круга	C-001.30.102	C-002.30.102
XHL Ксенон-галогеновая лампа	X-001.88.069	X-002.88.070

Набор включает:

офтальмоскоп BETA200, запасную лампу, твердый кейс.

Наборы офтальмоскопа BETA200	2,5 В	3,5 В (NiMH)	3,5 В
Батарейная рукоятка BETA	C-144.10.118		
Перезаряжаемая рукоятка BETA R		C-144.20.376	C-144.27.376
Перезаряжаемая рукоятка BETA TR с трансформатором		C-144.20.384	C-144.27.384
Перезаряжаемая рукоятка BETA NT с зарядным блоком NT 300		C-144.20.420	
Перезаряжаемая рукоятка BETA L с зарядным блоком NT 300			C-144.29.420

Перезаряжаемая рукоятка с индикатором заряда на нижнем модуле.



HEINE ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ ОФТАЛЬМОСКОПЫ ПРЯМЫЕ BETA 200

Варианты для покупки



Используется только с рукоятками BETA

ОФТАЛЬМОСКОП BETA 200

Набор включает:

офтальмоскоп BETA 200, ретиноскоп BETA 200 Streak (полоса), запасную лампу для каждого инструмента, твердый кейс.



Диагностические наборы BETA200	2,5 В	3,5 В (NiMH)	3,5 В 
Батарейная рукоятка BETA	C-145.10.118		
Перезаряжаемая рукоятка BETA R		C-145.20.376	C-145.27.376
Перезаряжаемая рукоятка BETA TR с трансформатором		C-145.20.384	C-145.27.384
Перезаряжаемая рукоятка BETA NT с зарядным блоком NT 300		C-145.20.420	
 Перезаряжаемая рукоятка BETA L с зарядным блоком NT 300			C-145.29.420

 Перезаряжаемая рукоятка с индикатором заряда на нижнем модуле.



HEINE ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ ОФТАЛЬМОСКОПЫ ПРЯМЫЕ ВЕТА 200


Варианты для покупки



Используется только с рукоятками ВЕТА

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ НАБОРЫ HEINE

Набор включает:
офтальмоскоп ВЕТА200, Ф.О. отоскоп ВЕТА200,
набор многоразовых ушных воронок (В-000.11.111), по 5 одноразовых ушных воронок
AllSpec 2,5 и 4 мм, запасную лампу для каждого инструмента, твердый кейс.

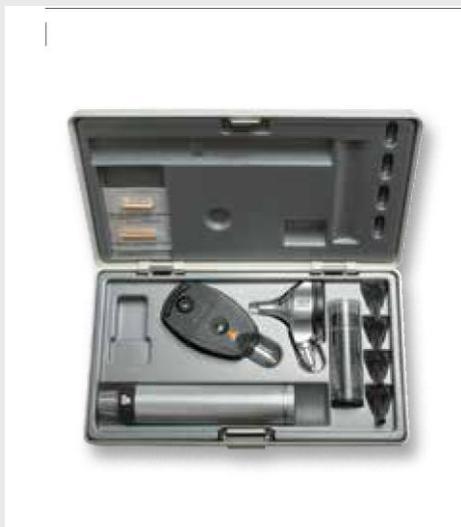

Диагностические наборы HEINE	2,5 В	3,5 В (NiMH)	3,5 В 
Батареечная рукоятка ВЕТА	A-132.10.118		
Перезаряжаемая рукоятка ВЕТА R		A-132.20.376	A-132.27.376
Перезаряжаемая рукоятка ВЕТА TR с трансформатором		A-132.20.384	A-132.27.384
Перезаряжаемая рукоятка ВЕТА NT с зарядным блоком NT 300		A-132.20.420	
 Перезаряжаемая рукоятка ВЕТА L с зарядным блоком NT 300			A-132.29.420

 Перезаряжаемая рукоятка с индикатором заряда на нижнем модуле.



HEINE ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ ОФТАЛЬМОСКОПЫ ПРЯМЫЕ BETA 200

Варианты для покупки



Используется только с рукоятками BETA

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ НАБОРЫ HEINE

Набор включает:

офтальмоскоп BETA 200, диагностический отоскоп BETA 100, набор многоцветных ушных воронок (B-000.11.221), 10 шт. одноразовых ушных воронок 4 мм, запасную лампу для каждого инструмента,, твердый кейс.



Диагностические наборы HEINE	2,5 В	3,5 В (NiMH)	3,5 В 
Батарейная рукоятка BETA	A-234.10.118		
Перезаряжаемая рукоятка BETA R		A-234.20.376	A-234.27.376
Перезаряжаемая рукоятка BETA TR с трансформатором		A-234.20.384	A-234.27.384
Перезаряжаемая рукоятка BETA NT с зарядным блоком NT 300		A-234.20.420	
 Перезаряжаемая рукоятка BETA L с зарядным блоком NT 300			A-234.29.420
 Перезаряжаемая рукоятка с индикатором заряда на нижнем модуле.			



HEINE ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ ОФТАЛЬМОСКОПЫ ПРЯМЫЕ К 180

Офтальмоскопы для профессиональных осмотров.



Бескрасный фильтр
для всех: ✓



Апертур : 5

Ряд линз: **-35+40**

Кол-во линз: **27**

ЭКОНОМИЧНАЯ
АЛЬТЕРНАТИВА
ОФТАЛЬМОСКОПА К 180

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

27 ЛИНЗ ОТ -35 ДО +40 ДИОПТРИЙ. ОТЛИЧНОЕ
ИЗОБРАЖЕНИЕ ДАЖЕ ПРИ ВЫСОКИХ КОРРЕКЦИЯХ.

+ шаг в 1 диоптрию 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/15/20/40D (зеленый)

- шаг в 1 диоптрию 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/15/20/25/30D (красный)

ПЯТЬ АПЕРТУР ДЛЯ ШИРОКОГО И УЗКОГО ЗРАЧКОВ

Щель, фиксационную звезду с линейкой или кобальтовый голубой
фильтр и «бескрасный» (свободный от красного) фильтр для
улучшения контрастности.



HEINE ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ ОФТАЛЬМОСКОПЫ ПРЯМЫЕ HEINE K 180®

Варианты для покупки



Используется только с рукоятками BETA

ОФТАЛЬМОСКОП HEINE K 180®

Офтальмоскоп K 180	2,5 В	3,5 В
Без рукоятки, с колесом апертур 1	C-001.30.206	C-002.30.206
Без рукоятки, с колесом апертур 2 и кобальтовым голубым фильтром	C-001.30.207	C-002.30.207
XHL Ксенон-галогеновая лампа	X-001.88.084	X-002.88.086

Набор включает:
офтальмоскоп K 180 с колесом апертур 1, мягкий чехол.

Наборы офтальмоскопа K 180	2,5 В	3,5 В (NiMH)	3,5 В
Батарейная рукоятка BETA	C-182.10.118		
Перезаряжаемая рукоятка BETA R		C-182.20.376	C-182.27.376
Перезаряжаемая рукоятка BETA TR с трансформатором		C-182.20.384	C-182.27.384
Перезаряжаемая рукоятка BETA NT с зарядным блоком NT 300		C-182.20.420	
Перезаряжаемая рукоятка BETA L с зарядным блоком NT 300			C-182.29.420



Перезаряжаемая рукоятка с индикатором заряда на нижнем модуле.



HEINE ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ ОФТАЛЬМОСКОПЫ ПРЯМЫЕ HEINE K 180®

Варианты для покупки



Используется только с рукоятками BETA

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ НАБОРЫ HEINE

Офтальмологические наборы HEINE K 180®

Набор включает:

офтальмоскоп K 180, Ф.О. отоскоп K 180, набор многоразовых ушных воронок (B-000.11.111), твердый кейс.



Диагностические наборы K 180	2,5 В	3,5 В (NiMH)	3,5 В 
Батарейная рукоятка BETA	A-279.10.118		
Перезаряжаемая рукоятка BETA R		A-279.20.376	A-279.27.376
Перезаряжаемая рукоятка BETA TR с трансформатором		A-279.20.384	A-279.27.384
Перезаряжаемая рукоятка BETA NT с зарядным блоком NT 300		A-279.20.420	
 Перезаряжаемая рукоятка BETA L с зарядным блоком NT 300			A-279.29.420
 Перезаряжаемая рукоятка с индикатором заряда на нижнем модуле.			





**HEINE ПРЯМЫЕ ОФТАЛЬМОСКОПЫ
ПОРТАТИВНЫЙ КАРМАННЫЙ ВАРИАНТ**

HEINE КАРМАННЫЙ ОФТАЛЬМОСКОП MINI3000® LED

Освещение с современной светодиодной технологией LED
Конкурентные преимущества

Используется только с рукояткой MINI 3000



ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ

**CRI
98**

CRI более 95
CRI красного более 90
Температура цвета: 4000 K

НАДЕЖНЫЙ И ТОЧНЫЙ ДИАГНОЗ

Практически неограниченный срок службы:
нет необходимости заменять лампу

СРОК СЛУЖБЫ СВЕТОДИОДА – 50000 ЧАСОВ.

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

**LONG
LIFE**

ИНТЕНСИВНОСТЬ СВЕТА



Специальная оптическая система для
каждого прибора

**ОПТИМИЗАЦИЯ ЯРКОСТИ ДЛЯ
ДИАГНОСТИКИ**

Светодиоды потребляют меньше энергии
чем галогеновые лампы. Реже замены
батареи, меньше циклов заряда.
Когда прибор включен, отображается
максимальная интенсивность света. Затем
интенсивность света регулируется до
уровня, соответствующего заряду батареи.
Вы будете знать, когда батареи требуют
замены.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ



ОДНОРОДНОСТЬ ОСВЕЩЕНИЯ



Интегрированный модуль света

ОДНОРОДНЫЙ СВЕТ ОТ КРАЯ ДО КРАЯ

Уникальный индикатор работы батареи

**ДО 10 ЧАСОВ РАБОТЫ
УВЕЛИЧЕНИЕ СРОКА СЛУЖБЫ БАТАРЕИ**

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ



ТЕРМОРЕГУЛИРОВАНИЕ



**СТАБИЛЬНОЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ
КАЧЕСТВО**

Индикатор низкого уровня заряда батареи

ОТОБРАЖЕНИЕ ОТСУТСТВИЯ ЗАРЯДКИ

ФУНКЦИЯ FADE-OUT



HEINE ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ ОФТАЛЬМОСКОПЫ ПРЯМЫЕ HEINE MINI 3000® LED

Варианты для покупки



Используется только с рукоятками MINI 3000

Офтальмоскоп HEINE mini 3000® LED

Офтальмоскоп mini 3000 LED	2,5 В
С батарейной рукояткой mini 3000, с батареями	D-008.71.120
С перезаряжаемой рукояткой mini 3000 (пожалуйста, заказывайте зарядный блок mini NT отдельно)	D-008.71.200
Без рукоятки	D-008.71.105

АПЕРТУРЫ MINI 3000

Фиксационная звезда, большой круг и малый, полукруг,
«бескрасный» фильтр.



HEINE ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ ОФТАЛЬМОСКОПЫ ПРЯМЫЕ HEINE MINI 3000® LED

Варианты для покупки



Используется только с рукоятками MINI 3000

Апертуры MINI 3000

Фиксационная звезда, большой круг и малый, полукруг, «бескрасный» фильтр.



Диагностические наборы с офтальмоскопом HEINE mini 3000® LED

Диагностические наборы HEINE mini 3000® LED
Все рукоятки снабжены батареями (IEC LR 6 размера AA, или дополнительно аккумуляторная батарея с зарядным устройством mini NT*).



Набор включает:

офтальмоскоп mini 3000 LED, твердый кейс.

Диагностический набор mini 3000 LED	2,5 В
Батареечная рукоятка mini 3000, с батареями	D-885.21.021

Набор D-886 включает:

офтальмоскоп mini 3000 LED, Ф.О. отоскоп mini 3000 IEd, набор из четырех многоразовых ушных воронок (B-000.11.111), по 5 одноразовых ушных воронок AllSpec 2,5 и 4 мм, твердый кейс.

Диагностический набор mini 3000 LED	2,5 В
2 батареечные рукоятки mini 3000, с батареями	D-886.11.021

Набор D-860 включает:

офтальмоскоп mini 3000 LED, Ф.О. отоскоп mini 3000 IEd, зарядный блок mini NT, по 5 одноразовых ушных воронок AllSpec 2,5 и 4 мм.

Диагностический набор mini 3000	2,5 В
2 перезаряжаемые рукоятки mini 3000	D-860.11.022*

HEINE ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ ОФТАЛЬМОСКОПЫ ПРЯМЫЕ HEINE MINI 3000® LED

Варианты для покупки



Используется только с рукоятками MINI 3000



Офтальмоскоп HEINE mini 3000®

Офтальмоскоп mini 3000	2,5 В
С батарейной рукояткой mini 3000, с батареями	D-001.71.120
С перезаряжаемой рукояткой mini 3000 (пожалуйста, заказывайте зарядный блок mini NT отдельно)	D-001.71.200
Без рукоятки	D-001.71.105

XHL Ксенон-галогеновая лампа	X-001.88.106
------------------------------	---------------------

Набор D-852 включает:
офтальмоскоп mini 3000, твердый кейс.

Диагностический набор mini 3000	2,5 В
Батарейная рукоятка mini 3000, с батареей	D-852.10.021

АПЕРТУРЫ MINI 3000

Фиксационная звезда, большой круг и малый, полукруг, «бескрасный» фильтр.



**САМАЯ ДЕШЕВАЯ МОДЕЛЬ
ОФТАЛЬМОСКОПА**

HEINE ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ ОФТАЛЬМОСКОПЫ ПРЯМЫЕ HEINE MINI 3000®

Варианты для покупки



Используется только с рукоятками MINI 3000

Диагностические наборы HEINE MINI 3000®

Все рукоятки снабжены батареями (IEC LR 6 размера AA, или опционально аккумуляторная батарея с зарядным устройством mini NT*).
Пожалуйста, заказывайте запасные лампы отдельно.

Набор D-873 включает:

офтальмоскоп mini 3000, отоскоп mini 3000 F.O., набор из четырех многоразовых ушных воронок (B-000.11.111), по 5 одноразовых ушных воронок AllSpec 2,5 и 4 мм, твердый кейс.

Диагностический набор mini 3000	2,5 В
2 батарейные рукоятки mini 3000, с батареей	D-873.11.021
Аналогичен D-873.11.021, только с ОТОСКОПОМ mini 3000	D-873.21.021

Набор D-859 включает:

офтальмоскоп mini 3000, отоскоп mini 3000 F.O., зарядный блок mini NT, по 5 одноразовых ушных воронок AllSpec 2,5 и 4 мм.

Диагностический набор mini 3000	2,5 В
2 перезаряжаемые рукоятки mini 3000	D-859.11.022*



АПЕРТУРЫ MINI 3000

Фиксационная звезда, большой круг и малый, полукруг, «бескрасный» фильтр.



**САМАЯ ДЕШЕВАЯ МОДЕЛЬ
ОФТАЛЬМОСКОПА**