

Фиброоптический (F.O.) проектор HEINE НК 7000



Фиброоптический проектор НК 7000 оснащен специальной долговечной галогенной лампой мощностью 150 Вт. Если для выполнения конкретной задачи требуется большая интенсивность света, можно использовать переключатель повышения мощности, который увеличит интенсивность освещения на 40%. Подходит для всех систем HEINE с фиброоптическим освещением.

Размеры: ширина 177 мм, высота 125 мм, глубина 217 мм.
Масса 3690 г.


- ⋆ Мощная галогенная лампа. Для максимальной яркости.
- ⋆ Асферическая оптика освещения. Интенсивное освещение с высокой цветовой температурой.
- ⋆ Плавная регулировка интенсивности света без изменения цветовой температуры. Позволяет уменьшить яркость света без красного смещения.
- ⋆ Переключатель повышения мощности. Обеспечивает на 40% больше света.
- ⋆ Увеличенный срок службы лампы – ок. 300 часов.
- ⋆ Складная ручка. Прост в транспортировке.
- ⋆ Размещается на столе, настенном креплении или передвижном штативе. Адаптируется в соответствии с индивидуальными потребностями.

Фиброоптический (F.O.) проектор НК 7000

С запасной ксенон-галогеновой (XHL) лампой на 150 Вт и предохранителем	Y-096.15.121
Запасной предохранитель	Y-096.15.110
Запасная ксенон-галогеновая (XHL) лампа на 150 Вт	Y-096.15.102
Настенное крепление для проектора НК 7000	Y-096.15.105

Стандартный фиброоптический кабель для проекторов HEINE

Для использования с фиброоптическими инструментами HEINE

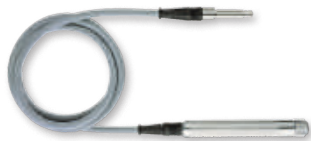

Фиброоптический кабель с рукояткой для подключения к проектору фиброоптических инструментов HEINE, например, инструментальной головки для одноразовых туб UniSpec и многоразовых фиброоптических осветительных головок аноскопов/проктоскопов, фиброоптических аноскопов, проктоскопов и сигмоидоскопов. Длина с рукояткой: 180 см.

- ⋆ Фиброоптический жгут высокого качества диаметром 4 мм. Отличная светопропускаемость. Очень гибкий.
- ⋆ Внутренняя металлическая оболочка. Устойчив к перегибам.
- ⋆ Гладкая наружная пластиковая оболочка. Легко очищается.

Стандартный фиброоптический кабель	Y-003.99.518
------------------------------------	--------------

Передвижной штатив



Подходит для всех фиброоптических проекторов HEINE, а также проекторов других производителей.

Размеры: высота 900 мм, масса 3500 г.

Основание: ширина 180 мм, высота 150 мм, глубина 240 мм

- ⋆ 5 ножек с широким (60 см) основанием. Обеспечивают устойчивость.
- ⋆ 2 колесных тормоза. Надежно удерживают штатив на месте.

Передвижной штатив – без основания	Y-096.50.001
Передвижной штатив – с основанием	Y-096.50.002




МЕДТЕХНИКА-СТОЛИЦА

ПРЕМИУМ ИНСТРУМЕНТЫ HEINE OPTOTECHNIK НЕЗАМЕНИМЫЕ ПОМОЩНИКИ ДЛЯ УВАЖАЮЩЕГО СЕБЯ И СВОИХ ПАЦИЕНТОВ – ВРАЧА!

Откройте для себя все преимущества качественной первичной диагностики различных заболеваний в медицине с инструментами HEINE OPTOTECHNIK. Сравните качество материала и дизайн Heine Optotechnik с конкурентами Kawe, Riester, Welch Allyn. Подержите в руках, хотя бы один любой прибор и Вам никогда не захочется использовать инструменты других производителей.

МЫ ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ В РАЗВИТИИ ДИЛЕРСКОЙ СЕТИ В РЕГИОНАХ РОССИИ! ПРИ ЗАПОЛНЕНИИ АНКЕТЫ И ДИЛЕРСКОГО ДОГОВОРА, ЗА ДИЛЕРОМ УСТАНОВЛИВАЕТСЯ ПОСТОЯННАЯ СКИДКА.

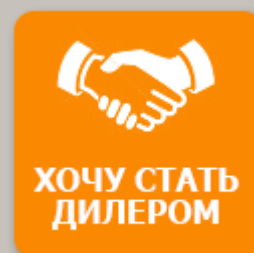

С 09.01.2020 года поставки оборудования HEINE Optotechnik GmbH & Co. KG, в государственные ЛПУ могут быть осуществлены только компаниями, наделенными Полномочиями от Производителя на право осуществлять квалифицированное послепродажное и техническое обслуживание продуктов.

Поставщики, наделенные Полномочием от Производителя, имеют право Заключать Договора, Контракты от своего имени, проводить любые консультации и осуществлять квалифицированное гарантийное и постгарантийное обслуживание в соответствии с требованиями и рекомендациями завода-изготовителя HEINE Optotechnik GmbH & Co. KG.



Вы всегда сможете скачать на нашем сайте: heine-med.ru в интересующем Вас разделе: брошюры, каталоги, инструкции по эксплуатации, презентации, видео и другие материалы

СВЕТОДИОДЫ В КАЧЕСТВЕ HEINE

CRI 95



ИНТЕНСИВНЫЙ СВЕТ



ОДНОРОДНЫЙ СВЕТ



УПРАВЛЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРОЙ СВЕТА

LONG LIFE

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

ОТЛИЧНАЯ ЦВЕТОПЕРЕДАЧА



Генеральный партнёр Heine Optotechnik GmbH & Co. KG в России и СНГ

TTT HealthCare GmbH Heimat 89, 14165 Berlin, Германия
Тел. +49 151 15353792, факс +49 30 84724773
E-Mail: info@ttt-gmbh.com www.ttt-gmbh.com

Авторизованный партнер, дистрибьютор Heine Optotechnik GmbH & Co. KG в России 2009-2020

МЕДТЕХНИКА-СТОЛИЦА ООО 127238, Москва, Дмитровское шоссе 89, офис 4-10
Тел. +7 (495) 902-59-26, +7 (925) 518-55-99, факс +7 (495) 902-59-26
E-Mail: medtextst@yandex.ru www.heine-med.ru



HEINE QUALITY
MADE IN GERMANY